

UPFLNTScan P3

口内扫描仪





UPFLNTScan P3

口内扫描仪

小身材大智慧开启口腔数字化诊疗新时代

▶ 感控无忧

新增按钮，与电脑无接触扫描。

使用设备遥控数据，随心查阅；

扫描病例，一键操作到底；

轻松体感操控，让临床操作更方便，院感防控再次升级。

▶ 更精准

全自主知识产权投影芯片模组及光学成像模组，提供精准测量保障。

凝视型3D扫描技术，一帧一计算，“凝视”般口内扫描，

瞬时三维成像，确保数据高精度。

▶ 更舒适

扫描头入口高度仅14mm独家专利设计多角度扫描头，
内置加热可高温高压消毒。

探头超低的开口度要求，减轻异物感；

D、M型扫描头，轻松扫描口内死角；

内置加热无雾干扰；

可耐高温高压。

▶ 更智能

大视野大景深：0~20mm；自动标定器便捷操作，简单易学；多学科应用

独特光路设计，扫描范围扩大至1.5颗磨牙；

全自动五维标定器，适应各种使用环境；

软件界面直观友好，简单易学；

高清成像，临床沟通无碍；


自动去除软组织，避开颊、舌、唇粘膜的影响。

▶ 更小巧

重量仅228g 机身216mmx40mmx36mm

科学设计，重量轻，小巧灵动，减轻医生扫描负担；

“小蛮腰”流线型设计，更符合医生操作习惯，方便握持；

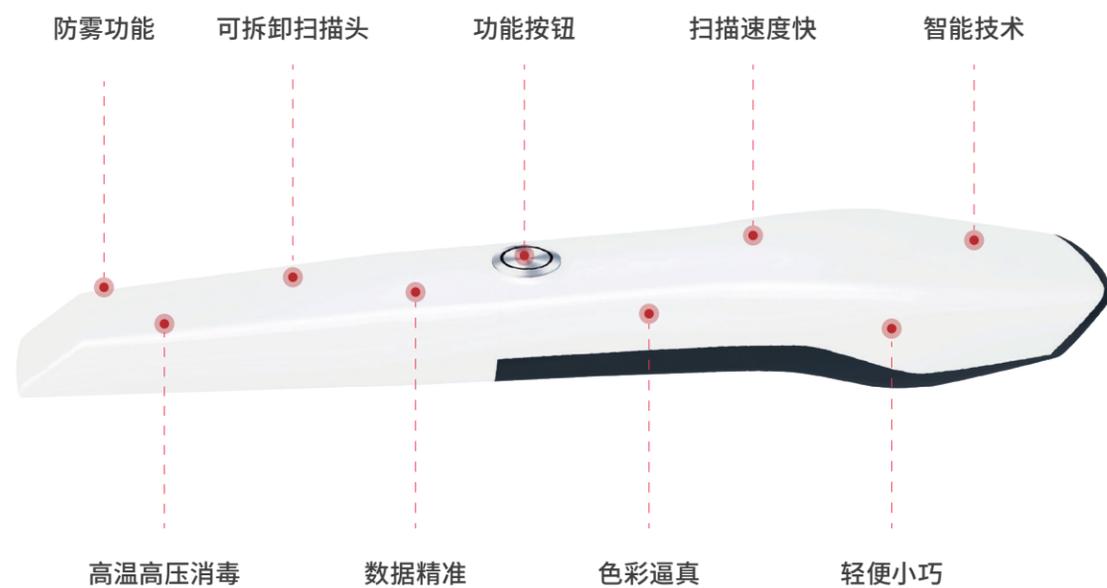

尺寸	精密度	精准度	扫描技术	扫描头规格
216X40X36mm	<10μm	<15μm	动态凝视三维扫描	三种规格, 支持高压蒸汽灭菌
重量	扫描开启方式	全口扫描时间	光源	扫描深度
228g	按钮/按键	<2分钟	白光LED+激光	多档可调, 最高可达20mm
扫描头尺寸	电源	接口	单次扫描范围	三维数据格式
83X19X14mm 82X20X16mm (D) 88X20X16mm (M)	100V-240V±10% 50/60Hz 2.0A (II类)	USB 3.0	18X16mm	STL; PLY; PTY 支持定制加密格式文件



深圳爱尔创数字口腔有限公司

Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com

Copyright©Upcera No.2026 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号